

Produkt-Datenblatt

Gymna Mobile Fit

Gymna Mobile Fit ist der spezielle Wagen für Ihre Gymna Ultrasound compact und Acure Geräte. Unser kompakter, solider und stabiler Wagen ist leicht zu reinigen und zu desinfizieren.

Er ist mit vier selbsthemmenden Lenkrollen ausgestattet, von denen zwei gebremst sind.

Die mitgelieferte Schublade, die Vaco-Saugknopfhalter und die Kabelhalterungen zeichnen das Gymna Mobile Fit durch seine Funktionalität aus. Er bietet Flexibilität mit dem Flaschenhalter, der auf der rechten oder linken Seite des Wagens platziert werden kann und die Möglichkeit, Ihren Wagen mit den folgenden Optionen individuell zu gestalten:

- Zusätzliche Schublade
- Handstückhalterung zur Aufnahme Ihrer Ultraschallhandstücke

STANDARDEIGENSCHAFTEN

Einlegefach

Für die sichere Platzierung der Ultrasound Compact und der Acure Serie. Mit Öffnung für die Netzkabel. Abnehmbar für einfache Reinigung.

Herausnehmbare Schublade

Für griffbereites Zubehör, leichte Reinigung bei Bedarf. Mit Öffnungen zur Kabelzufuhr an der Rückseite.

Robuste Mittelsäule


Ermöglicht das Verstecken und den Schutz von Stromkabeln.

Abnehmbarer Vaco-Saugknopfhalter
Für ordentliche Aufbewahrung.

Zwei Haltegriffe
Für ein sicheres Bewegen innerhalb der Praxis

Ablagefläche in ergonomischer Höhe
Arbeitshöhe für den Komfort des Benutzers im Sitzen und Stehen. Einschließlich Kabelführung an der Vorderseite.

Fußaufsatz
Ermöglicht die Neupositionierung des Mobile Fit mit dem Fuß. Ein Vorteil, wenn der Physiotherapeut Gel oder Lotion auf den Händen hat.

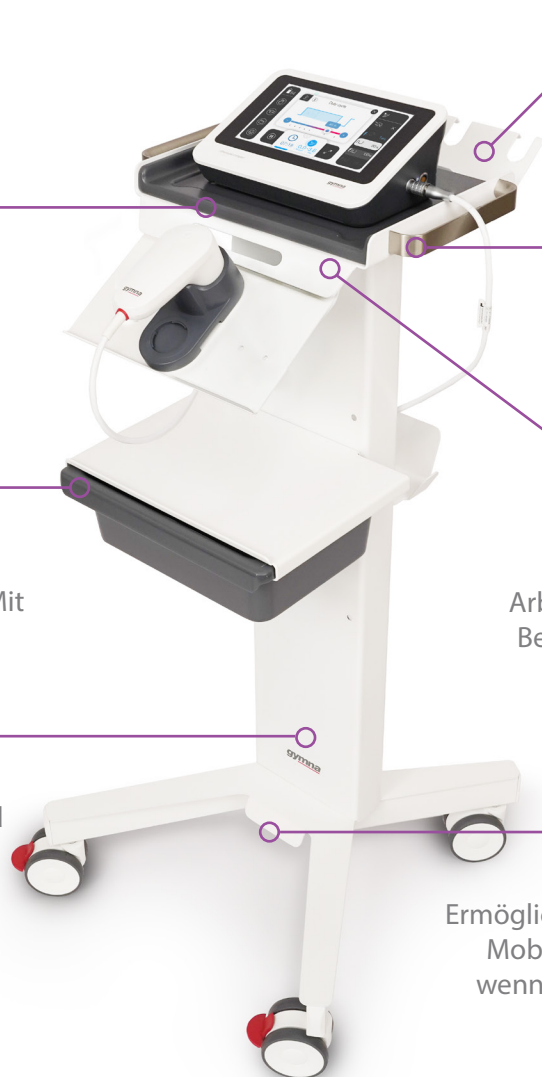

Zwei Kabelöffnungen

Auf der Rückseite positioniert, um das Aufladen zu ermöglichen.
(ZB USB-C)

Abnehmbare Flaschenhalter

Die Flasche kann auch auf dem Kopf stehend gelagert werden. Der Halter kann sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite montiert werden.

Abnehmbare Kabelhalterung


Halterung für die ordentliche Aufbewahrung. Praktisch, wenn der Mobile Fit verschoben wird.

Vier Schwenkräder

Für freies und leichtes Manövrieren. Zwei feststellbare Vorderräder, um den Wagen in Position zu halten.

Zwei Kabelöffnungen

Für Netzkabelführung/-management

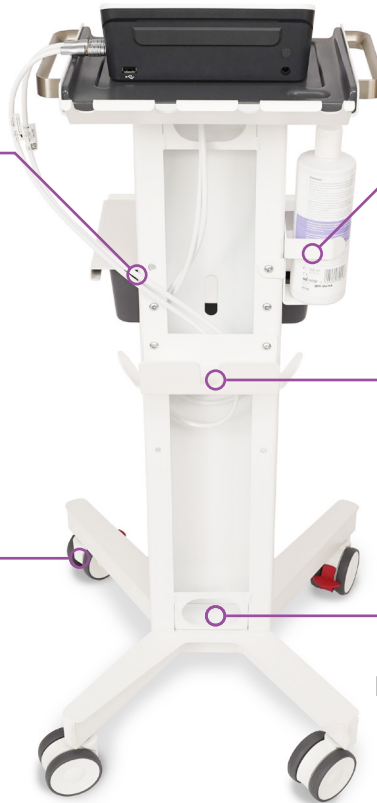

Gymna Mobile Fit

368.005

OPTIONALE EIGENSCHAFTEN



Extra herausnehmbare Schublade

Ermöglicht bei Bedarf eine leichte Reinigung.
368.027



Abnehmbare Handstückhalterung (abgewinkelte Platte)

Zur einfachen Platzierung von Ultraschallköpfen und Handstücken (bis zu 3 Handstücke). Enthält standardmäßig 1 Handstückhalterung
368.016

SPEZIFIKATIONEN

Gesamtabmessungen:	46 x 46 x 94 cm
Höhe Einlegeboden:	91 cm
Regalhöhe Schublade:	70cm (höchste), 65cm (mittlere), 45cm (niedrigste)
Maximale Belastung pro Fachboden:	5 kg
Maximal empfohlene Beladung des Fachs:	1 kg
Gewicht:	13 kg
Farbe:	weiß RAL 9016
Farbe obere Einlage / Schublade:	grau RAL 7024
Abmessungen der Verpackung:	57 x 66 x 108 cm
Gewicht einschließlich Verpackung:	18 kg