

# *ShockMaster* 500

BEYOND EXPECTATION



S H O C K M A S T E R 5 0 0

# Effizient und innovativ

*schnelle Behandlung*  
schnelle Behandlung

*innovativ*  
innovativ

*effizient*  
effizient

## Eine schnelle, sichere und erfolgreiche Behandlung

Stoßwellentherapie hat die Welt erobert. Ursprünglich wurde diese Technik zum Zertrümmern von Nierensteinen eingesetzt. In den letzten Jahren wird die Stoßwellentherapie aber auch besonders wirkungsvoll in Rehabilitation, Orthopädie und Rheumatologie eingesetzt.

## ShockMaster 500

ShockMaster ist ein führender und weltweiter Partner für den Medizinmarkt. Mit innovativen und hochwertigen Lösungen für die Stoßwellentherapie liefert ShockMaster einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg seiner Anwender. Die enge Zusammenarbeit mit der medizinischen Wissenschaft führte zur Entwicklung des ShockMaster 500. Die einmalige Kombination von Spitzentechnologie mit einer intelligenten Benutzeroberfläche ist ein absolutes Muss für jede Praxis.



# Intelligent und einzigartig

## Der neue Standard in der Stoßwellentherapie

Durch unsere jahrelange Erfahrung auf dem Gebiet der Physiotherapie ist es uns gelungen, ein maßgeschneidertes Gerät zu entwickeln, das in seiner Funktionalität und seinen Anwendungsmöglichkeiten einzigartig ist.

## Intelligente Bedienoberfläche

Der ShockMaster 500 hat eine einfache, selbsterklärende Bedienoberfläche, über die der Anwender jederzeit die komplette Kontrolle über die Behandlung behält. Vielseitigkeit, Komfort, Design und vor allem Qualität machen den ShockMaster 500 zum perfekten Partner des Therapeuten. Der anwenderfreundliche Touchscreen bietet dem Therapeuten die Möglichkeit, die Behandlung des Patienten individuell an seine Krankengeschichte anzupassen. Darüber hinaus wird der Patient durch eine visuelle Bewertung über das VAS-Score-Diagramm extra motiviert.

## Vorteile:

- Indikationsmenü mit visueller Darstellung
- Praktisches und klares Navigationssystem
- Aufnahme zusätzlicher Indikationen möglich
- Visuelle Bewertung mit VAS-Score
- Nach eigenen Erkenntnissen einstellbar
- Interner Behandlungsführer
- Farb-LCD mit Touchscreen

Zielgerichtete Navigation aufgrund von Indikationen




Vorprogrammierte Parametereinstellungen einfach nach eigenen Erkenntnissen anzupassen




Deutliche Lokalisierung für das Handgerät



Heilungsprozess über VAS-Score-Diagramm dargestellt

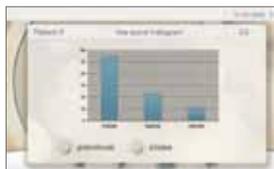

Extra Informationen über die Indikationen

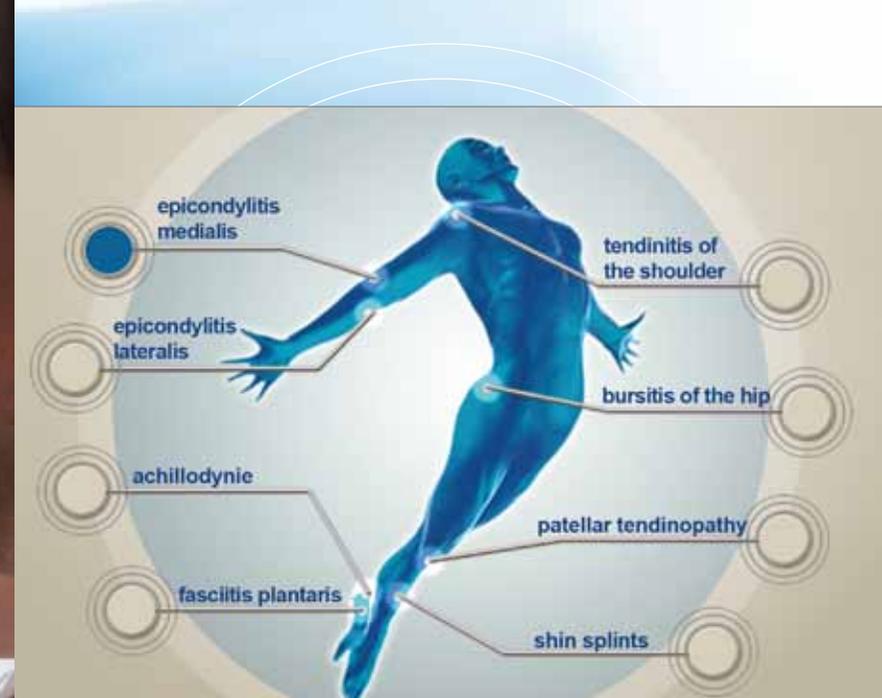

Bildschirm Body Parts

# Funktionalität und High Tech

## Behandlung ohne Einschränkung

ShockMaster steht für Spitzentechnologie und Benutzerfreundlichkeit. Das durchdachte Design ist das Ergebnis jahrzehntelanger Entwicklungserfahrung. Die modularen Produkteigenschaften bieten Therapeut und Patient außergewöhnlichen Komfort und spürbare Resultate.

## Vorteile

- Funktionelle Benutzeroberfläche
- 2 Anschlüsse für Handgeräte für optimale Behandlungsdauer
- Nahezu geräuschloser und vibrationsfreier Ölkompressor
- 6 verschiedene Behandlungsköpfe
- V-ACTOR®-Technologie zur Stimulation des Muskelmetabolismus
- D-ACTOR®-Technologie für Triggerpunkte und myofasziale Schmerztherapie
- Einfacher Wechsel von Verschleißteilen ohne Rücksendung dank des mitgelieferten Revisionskits
- Frequenz verstellbar von 1 - 21 Hz
- Druck verstellbar von 1 - 5 bar
- Gerät und Wagen ansprechend kombiniert
- Multifunktionaler Bügel
- Praktische Zubehörlade



ShockMaster-Produktreihe:

## Die ideale Kombination für Ihre Praxis

Komfort und Effizienz sind bei jeder Behandlung entscheidend für Sie und für Ihren Patienten. ShockMaster unterstützt Sie dabei durch seine komplette Produktreihe. Durch die Kombination Ihres ShockMaster 500 mit der Liege C200 und dem Kryotherapiegerät ICE-CT richten Sie in Ihrer Praxis ein komplettes Zentrum für Stoßwellentherapie ein.

### Behandlungsliege C200

Die Liege C200 gewährleistet eine bequeme Behandlung für jeden Patienten und jede Indikation. Die äußerst flexible Behandlungsliege ist ein unentbehrlicher Partner bei Ihren Stoßwellenbehandlungen.

### ICE-CT

In Kombination mit dem ShockMaster 500 bietet das Kryotherapiegerät ICE-CT dem Patienten mehr Komfort, weniger Schmerzen und weniger Nebenwirkungen. Mit dieser Kryo-Lösung bleibt ShockMaster seiner Vorreiterrolle treu. Das einzigartige Infrarotsystem misst nicht nur die Temperatur der behandelten Stelle, sondern passt automatisch den Luftstrom an, um die Hauttemperatur unter Kontrolle zu halten.

## “Join the club“: nutzen Sie Ihren ShockMaster optimal und holen Sie das Beste aus Ihrer Praxis

Als Kunde haben Sie die einmalige Gelegenheit, auf [www.shockmaster.eu](http://www.shockmaster.eu) dem virtuellen ShockMaster-Club beizutreten. Dadurch erhalten Sie Zugang zu neuester Literatur,



Informationen über Messen, Kongresse, Seminare und Marketingmaterial. Außerdem finden Sie dort das ShockMaster Forum, wo Sie Erfahrungen über Behandlungen, Ergebnisse, Parameter usw. austauschen können.

The right to make changes is reserved. 'Shockmaster' is a division of GymnaUniphy

### FAKTEN UND ZAHLEN

Anschlüsse Handgerät	: 2
Kompressor	: 40 dB, 8 bar, 50 l/min
Frequenzbereich	: 1 - 21 Hz (35 Hz mit V-ACTOR®)
Druck	: 1 - 5 bar
Max. Energiedichte	: 0,38 ml/mm <sup>2</sup> (0,63ml/mm <sup>2</sup> mit Deep Impact)
Positiver Ausgangsdruck	: 18,5 Mpa
Gesamtgewicht inkl. Kompressor	: ca. 35 kg + 22 kg Kompressor
Software-Update	: USB-Anschluss
Patienten-Datenbank	: 2500 Patienten
Fahrbar	: 4 Schwenkräder
Bedienplatte	: LCD-Farb-Touchscreen
Druckregelung	: elektronisch
Voreinstellung counter	: ja, plus extra Unterstützung durch Lichtbalken
Handgerät On/Off-Funktion	: elektronisch

### STANDARDZUBEHÖR

- Ergonomisches Handgerät
- Classic-Kopf 15 mm
- D-ACTOR®-Kopf 20 mm
- Revisionskit für 2 Revisionen

### OPTIONALES ZUBEHÖR

- Zweites ergonomisches Handgerät
- V-ACTOR®-Handteil (V-ACTOR®-Kopf 25 mm/40 mm)
- D-ACTOR®-Kopf 35 mm
- Fokuskopf
- Deep Impact Kopf
- Akupunkturkopf

